

Sıkılaştırıcı, Lifting ve Cilt gençleştirme bir kez TR1470 tedavisi sırasında



1.Teknik özellikler:

Dalga Boyu Lazer	1470nm
Lazer	Yüksek Güçlü Diyot (GaAs)
Lazer Enerjisi	ABD jeneratörlü 20w
Elyaf çapı	400um/600um/800um
Fiber konektörü	SMA905
Darbe süresi (T on)	0.1-10.0s
Darbe gecikmesi (T off)	0.1-10.0s
Operasyon modu	Tek darbe modu – darbeli mod – sürekli mod
Soğutma sistemi	Hava soğutma sistemi kombine radyatör
Hedef ışın	Ayarlanabilir Kırmızı gösterge ışığı 650nm
Elektrik gücü	110 – 230 V 50/60 Hz
Ağırlık ve boyutlar	6.5kg-27*30*30cm
Garanti	Bir yıl




2. Optimum Lazer Dalga Boyu-1470nm

Spesifik 1470 nm dalga boyu, hücre dışı matrikste ki neokollajenezi ve metabolik fonksiyonları aktive ettiğinden su ve yağ ile ideal bir etkileşime sahiptir. Esasen kolajen doğal olarak üretilmeye başlayacak ve göz torbaları kalkıp sıkılaşmaya başlayacaktır.

-Mekanik kasılma – bu, cildin anında sıkılaşması ve sıkılaşması gibi geçici bir etki sağlarken, önemli olan vücudun devam eden tepkisidir...

-Cilt 'mimarisinin' iyileştirilmesi – kolajen ve elastin gibi yapısal proteinler Endolift'e yanıt olarak doğal olarak üretilir. Erken belirtiler 4-8 hafta gibi kısa bir sürede görülebilir, ancak süreç zamanla işlemeye devam eder ve işlemden 9-12 ay sonra 'zirve' sonuçlar elde edilir.

-Cilt yüzeyi gençleştirme – Endolift tarafından başlatılan doğal iyileşme süreci nedeniyle proteinlerdeki artış, cilt yüzeyinin hissi ve görünümü üzerinde etkileyici bir etkiye sahiptir.

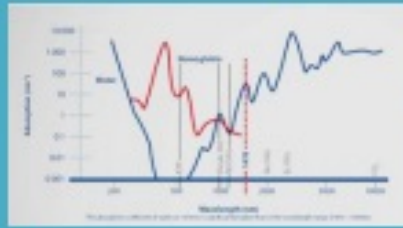

3. TR1470NM Prosedürü

Lazer cihazımız kolajen liflerinin anında kasılmasını, cilt yapısının yeniden yapılandırılmasını ve gerilmesini, ardından kolajen miktarının artmasını ve ciltte kalınlaşmayı sağlar. Ayrıca hamster, çene veya kollar, karın, uyluk bölgelerinde biriken fazla yağın alınmasını sağlayan çok yüzeysel ve dolayısıyla güvenli bir lipoliz (yağ hücrelerinin yok edilmesi) de vardır. Tedavi ayrıca alt göz kapağı, çene, burun, çene ve boyun dahil olmak üzere yüz derisinin sıkılaştırılması için de kullanılır.

TR1470NM Lazer Lipoliz, hastanın işlem boyunca uyanık ve bilinçli olduğu lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Kullanılan tipik lokal anestezi, hastaya neredeyse ağrısız bir prosedür sağlayan, son derece etkili uyuşturma maddesi olan lidokaindir.

İşlem sırasında ciltte çok küçük kesiler (yaklaşık 1/8 inç) açılarak, lazer fiberini çevreleyen mikro kanülün cilt altına yerleştirilmesine olanak sağlanır.

4. Uygulamalar

Orta yüz germe,

Gıdı sıkılaştırma,

Çene hattının tanımlanması,

Alt göz kapaklarındaki torbanmaların düzeltilmesi,

Üst göz kapağının sarkması, kaşların kaldırılması,

Boyun çizgilerinin sıkılaştırılması,

Cildi sıkılaştırma, derin nazolabial kıvrımlar gibi kırışıklıkları tedavi etme (burun kenarlarından dudak köşelerine kadar uzanan çizgiler) ve kukla (ağız köşesinden çeneye kadar uzanan çizgiler),

Dolgu fazlalığının ve dolgulardan kaynaklanan asimetrielerin düzeltilmesi,

Dizdeki yağ birikiminin tedavi edilmesi,

Diz kapaklarındaki fazla derinin sıkılaştırılması,


Selülit tedavisi.



YÜZ SONUÇLARI



GÖVDE SONUÇLARI

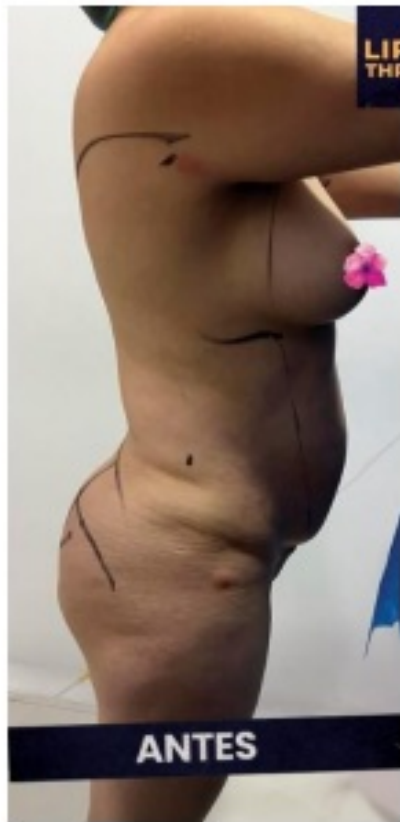

LIPOLISIS
THREE LASER



OEM HİZMETİ



2023 yılında kurulan COLEMED PHARMA ULUSLARARASI SAĞLIK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ araştırma ve geliştirme, üretim ve dağıtımını birleştiren entegre bir güzellik ekipmanı servis sağlayıcısıdır. FDA, CE, ISO9001 ve ISO13485'in katı standartları altında hızlı gelişmeyle ürün yelpazesini Vücut zayıflama, RF cerrahi ekipmanları da dahil olmak üzere tıbbi estetik ekipmanlarına kadar genişletti. benzersiz tasarımları, zengin klinik araştırmaları ile müşterilerin ilgisini çekerek uluslararası bir üne kavuşmuştur. COLEMED PHARMA insanlara bilimsel, sağlıklı ve moda uyumlu bir güzellik yaşam tarzı sunmaya kendini adanmıştır. COLEMED PHARMA klinik işletmelerinde ürünlerini son kullanıcılara uygulama tecrübesini biriktirdikten sonra yatırımcılara profesyonel pazarlama, eğitim ve estetik ve tıp merkezleri işletmeciliği paket hizmeti sunmaktadır.